



User Guide

Vivify Pathways  Home TM

Version 11

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION	1
UNPACKING THE KIT	2
GETTING STARTED	3
Turning on the Tablet	3
Welcome to the Program	3
Accepting Terms and Conditions	4
Logging In	5
Completing Health Survey Questions	5
Viewing Education Videos	6
Understanding the Tablet	6
Requesting a Call	7
ENTERING VITALS	8
Weight	9
Oxygen Level and Pulse	9
Blood Pressure	9
Blood Sugar	9
PACKING THE KIT.....	10
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS.....	11
Incorrect Readings	11
Powering on Tablet	11
Reset Password	11
Viewing Health Data	11
Wireless Connectivity	11

INTRODUCTION

Thank you for participating in the care management program. Please read the introduction to the program.

Unpacking the Kit

After you open the box, follow the instructions to turn on the tablet. Keep it plugged in. Do not turn it off until you complete the program and return the kit. **IMPORTANT:** Keep the kit box for returning the kit, including the foam and strips of packing tape. The box to keep looks like a small suitcase. Store this box in a safe place to keep it from being lost or damaged.

Logging In

Create a password that you will remember. Write this password down. Keep it in a safe place. You will enter it every time you log in.

Entering Health Survey Responses and Vitals

When asked, select answers to the questions that best describe your current health. Follow the instructions for how to enter your vitals. Your care management team will be looking at your results. They may contact you to talk about your results.

Check-In Schedule

The tablet may make a noise, alerting you to check your vitals. Your care management team will decide how often this happens. Take your vitals by noon, unless your care management team tells you differently.

Repacking and Returning Your Health Kit

Your care management team will call you when the program is complete. They will tell you how to return the kit. Read *Packing the Kit* for details about how to repack the health kit.

DO NOT USE THIS PROGRAM FOR EMERGENCY OR URGENT CARE. IN AN EMERGENCY, CALL 911 OR GO TO THE NEAREST EMERGENCY ROOM. The program and program nurses and other representatives cannot diagnose your problems or suggest treatment. This program is not a substitute for your doctor's care. Your health information is kept confidential in accordance with the law. Any information and any device provided through this program is for your information only. Participation in the program and use of the device is voluntary, and your ability to use the device may differ depending on the nature of your medical condition. The program and device do not provide real-time monitoring or act as an emergency alert system, and are not intended for use when time-critical care is required.


UNPACKING THE KIT

The health kit contains devices for you to use during the care management program to record your vitals. All devices are ready to use with the tablet.

HEALTH KIT CONTENTS

The devices in the box may vary based on your program. For most programs, the box will have the following:

- Tablet
- Tablet stand
- Adapter and power cord
- Weight scale
- Blood pressure monitor
- Pulse oximeter

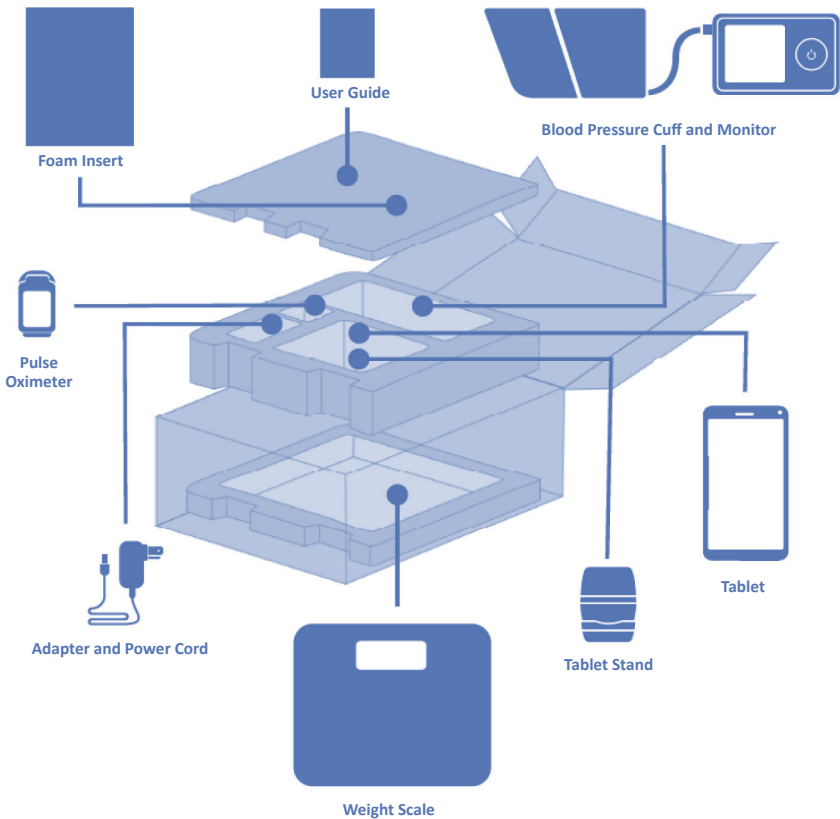

IMPORTANT: Keep the box that looks like a suitcase with foam inside for repacking. Store it in a safe area.

GETTING STARTED

TURNING ON THE TABLET

1. Unpack the kit.

Unpack the box on a table where you will use the tablet. You should be able to see the tablet when using the devices, so they can connect wirelessly.

2. Plug the power adapter into a nearby outlet. Insert the power cord into the tablet.

3. Turn on the tablet.

Press and hold down the power button for several seconds, then let go. Look at the image below. The power button is above the green dot on the tablet screen. Wait for the Welcome to the Program screen to appear.


4. Place the tablet in the tablet stand.

Keep the tablet on and plugged in until you complete the program and repack your kit.



WELCOME TO THE PROGRAM

When you select **OK** on the Welcome to the Program screen, the Date of Birth screen appears. In the **Date of Birth** box, enter your date of birth (MM/DD/YYYY) to confirm your identity. If the date of birth you enter does not match our records, you will see a message to contact support. After confirming your date of birth, the welcome (unpacking) video will appear.

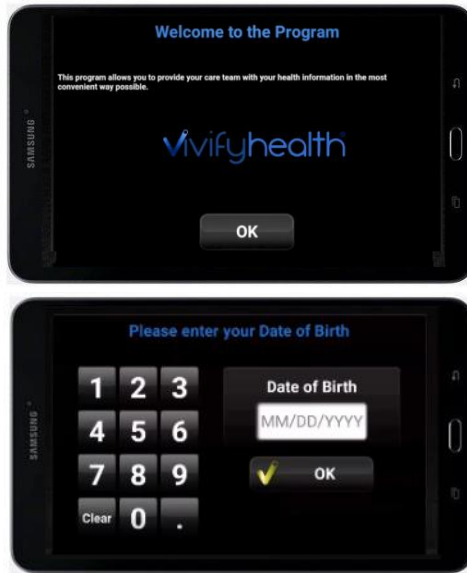

ACCEPTING TERMS AND CONDITIONS

After the video plays, read and select **I AGREE** to accept the End User License Agreement (EULA). *Note: You cannot continue until you agree to the program's terms and conditions.*



LOGGING IN

Create a password.

When the green login screen appears, create your password. Using the keypad, choose a four-digit number that you will remember. You cannot use the same number four times (1111). You cannot use numbers in order (1234). Write this number down. Store it in a safe place, so you can look at it later when logging in. Select **OK** to submit your password.



COMPLETING HEALTH SURVEY QUESTIONS

Questions appear in two ways:

Single Answer

When a question is asked, select an answer about your current health. Select **OK** to confirm. If you want to change your answer, select the correct answer. Then, select **OK** to confirm.



Multiple Answers


When a question is asked, select all answers about your current health. When you select one or more answers, **OK** will display. Select **OK** to confirm.



VIEWING EDUCATION VIDEOS

You may be asked to watch education videos or read about your health.

Select **Now** and then **OK** to watch the video now. Select **Later** and then **OK** to watch the video later.

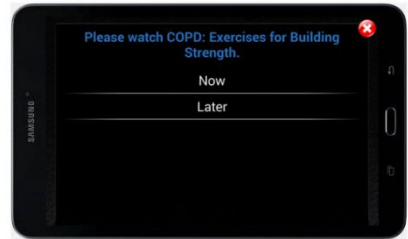

UNDERSTANDING THE TABLET

This is an image of the home screen when all tasks are done. The icons are based on your program. The icons show the tasks your care management team wants you to do. You may be asked to do these check-in tasks daily. You will be reminded by the colors changing and/or the tablet making a sound.




A green or orange checkmark means that you do not have any survey questions or vitals due. When a task is due, the icon color will change to gray, yellow, or red.

Gray	Yellow	Red	Green Check	Orange Check
Ready to start	Task is due now	Task is overdue	Task completed	Done for now

REQUESTING A CALL

You can ask for a call back from your care management team with your tablet. Call backs are not right away. Call backs happen during business hours. **This call back feature should not be used in an emergency.**

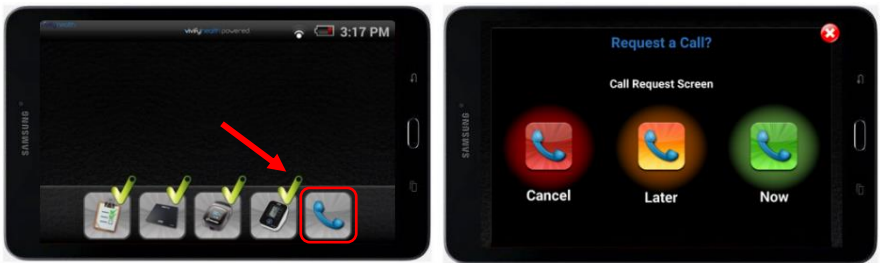

To ask for a call back, select the phone icon in the bottom-right corner of the home screen. The Request a Call screen appears with up to three options and may include **Cancel**, **Later**, and **Now**.



Select **Now** to ask for a quick call back (usually within two hours). If you ask for a call within two hours of the close of business, you may get a call back the next business day.



Select **Later** to ask for a call back by the end of the next business day (usually within twenty-four hours). After you select Now or Later, the phone icon on the home screen will turn green. This shows that you are waiting for a call. The care management team will try to reach you by phone or by video call on the tablet.



Select **Cancel** if you change your mind or to exit the call request screen. The home screen appears. The phone icon is gray. The color change shows that you have canceled the call request.

IMPORTANT: Do not use the Request a Call feature in an emergency. If you need emergency care, call 911.

ENTERING VITALS

All the devices in this guide may not be in the kit or you may not need them all. The tablet icons will show you the devices to use. This is set by your care management team. Before you start, the devices need to be close to the tablet. When the device is not being used, it will turn off by itself. **Devices are only meant to be used in home for non-emergency use.**

Device Instructions

Before using the devices, read the device instructions. These instructions tell you how to use each device. The instructions include details about when to talk to your doctor before using each device. Any software for download in the instructions is not required for this care management program.

With the devices in your kit, do the following:

1. **Watch the Help video.** When the tablet asks you to record your data, select **HELP** if needed. A video will begin to show you how to use the device.
2. **Record your vitals.** All devices will send data to the tablet and record your data. As you use each device, wait a few seconds for the device to get your reading. A number will display on the device. Confirm that the reading on the tablet matches the reading on the device. Select **OK** to accept. Select **YES** to confirm.

Manual Entry

If a device does not record your data, select Manual Entry. In the boxes, record your data. Select **OK** to accept. Select **YES** to confirm.

If the number you enter is incorrect, select **NO** to start over and enter your data again. If you are using your own device, you must enter your data manually.

IMPORTANT: This product is not intended for active or continuous patient monitoring and not intended for high-acuity environments. If you need emergency care, call 911 immediately.

WEIGHT

The weight scale is for you to use during the care management program to record your weight. Weigh yourself in the morning, after you have gone to the bathroom and before you have had anything to eat or drink.



OXYGEN LEVEL AND PULSE

The pulse oximeter is for you to use during the care management program to record your oxygen level and pulse. Do not wear nail polish or fake nails while using the pulse oximeter. If your hands are cold, warm your hands.



BLOOD PRESSURE

The blood pressure monitor is for you to use during the care management program to record your blood pressure. Do not smoke, drink caffeinated beverages, or exercise within one hour of measuring your blood pressure. Also, if your doctor told you to take blood pressure medication, do it one hour before taking your blood pressure reading.



BLOOD GLUCOSE



The glucose meter is for you to use during the care management program to record your blood glucose. Store the test strips in their container and avoid exposure to moisture.



IMPORTANT: This product is not intended for active or continuous patient monitoring and not intended for high-acuity environments. If you need emergency care, call 911 immediately.

PACKING THE KIT

1. Get the health kit box from your safe place. The box looks like a small suitcase. Remove the user guide, packing tape, and the layers of foam.
2. Unplug the tablet from your wall outlet. Hold down the power button to turn off the tablet. Get all the devices that go in the health kit box.
3. Place the scale in the bottom of the health kit box. Put the middle foam tray on top of the scale. Wind up the tablet power cord.
4. Place the power cord and adapter, pulse oximeter, blood pressure monitor, tablet stand, and tablet in their slots.
5. Remove the tape from the health kit user guide. Place the last piece of foam on top of the tablet. Close and seal the box with the tape you just took out of the user guide. If you cannot find the tape, you can use packing tape instead.
6. Your care management team will tell you how to return the health kit.

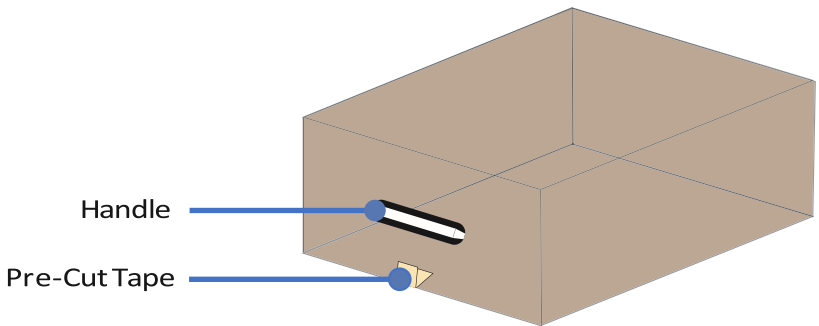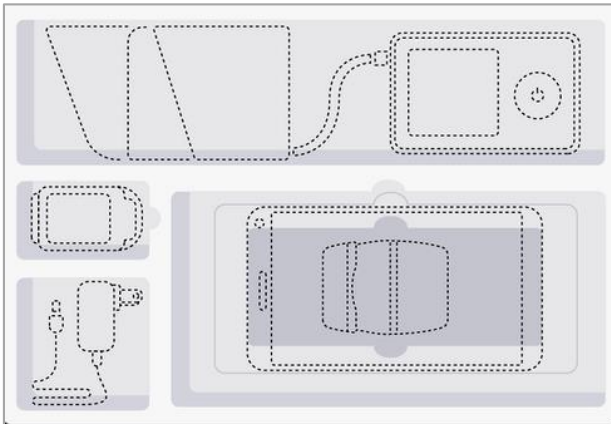

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

INCORRECT READINGS

Why does the blood pressure monitor show high readings or readings that are different from another blood pressure device I have used before?

Readings may vary from devices you already have. This is normal. Take your readings at the same time every day and while at rest. The most common cause for high readings is using the wrong sized blood pressure cuff. If the cuff does not fit or you have other questions about your health kit, please contact your care management team.

POWERING ON THE TABLET

The tablet is plugged in but will not power on.

Unplug the power cable from the tablet and press and hold down the power button for 10 seconds or until the screen shows “Samsung”. Once powered on, plug the power cable back into the tablet.

RESETTING YOUR PASSWORD

How do I reset my password?

If you forget your password, select “Help” on the login screen, then “request password reset” on the next screen. When your request is accepted by your care management team, the tablet will ask you to create a new password.

VIEWING HEALTH DATA

Can I view my data once it has been logged?

Once your vitals have been logged, you can look at the data with the Trend button. Not all tablets let you view your trend health data. Your care management team will review your information. If needed, they will contact you to talk about your trended results.

WIRELESS CONNECTIVITY

Why did the device not send my information to the tablet?

Keep the devices in your kit close to the tablet. If the tablet does not get your reading from a device, enter it on the tablet. It is important to do your daily readings. Your care management team will contact you to help if they see a lot of manual entries.

PREGUNTAS FRECUENTES

LECTURAS INCORRECTAS

¿Por qué el monitor de presión arterial muestra lecturas altas o diferentes a las de otro dispositivo de presión arterial que he usado anteriormente?

Las lecturas pueden variar de otros dispositivos que tengas. Esto es normal. Toma tus lecturas a la misma hora todos los días y en reposo. La causa más común de lecturas altas es el uso de un brazalete de presión arterial de tamaño incorrecto. Si el brazalete no te queda bien o si tienes otras preguntas sobre tu kit de salud, comunícalo con tu equipo de gestión de la atención médica.

ENCENDIDO DE LA TABLETA

La tableta está conectada pero no enciende.

Desenchufa el cable de alimentación de la tableta y mantén presionado el botón de encendido durante 10 segundos o hasta que la pantalla muestre “Samsung”. Una vez encendida, vuelve a conectar el cable de alimentación a la tableta.

REESTABLECER TU CONTRASEÑA

¿Cómo restablezco la contraseña?

Si olvidas tu contraseña, selecciona “Help” (Ayuda) en la pantalla de inicio de sesión, luego “request password reset” (solicitar restablecimiento de contraseña) en la siguiente pantalla. Cuando tu equipo de gestión de la atención médica acepte tu solicitud, la tableta te pedirá que crees una nueva contraseña.

VISUALIZAR LA INFORMACIÓN DE SALUD

¿Puedo ver mis datos una vez que los haya registrado?

Una vez que hayas registrado tus signos vitales, puedes ver los datos con el botón Trend (Evolución). No todas las tablas permiten ver la evolución de los datos de salud. Tu equipo de gestión de la atención médica revisará tu información. Si es necesario, se comunicarán contigo para hablar sobre la evolución de tus resultados.



CONECTIVIDAD INALÁMBRICA

¿Por qué el dispositivo no envió mi información a la tableta?

Mantén los dispositivos del kit cerca de la tableta. Si la tableta no recibe la lectura de un dispositivo, ingresa los valores en la tableta. Es importante que hagas tus lecturas diariamente. Tu equipo de gestión de la atención médica se comunicará contigo para ayudarte si ven muchas entradas manuales.

EMPACAR EL KIT

1. Busca la caja del kit de salud en el lugar seguro donde la habías guardado. La caja parece una maleta pequeña. Retira la guía del usuario, la cinta de embalaje y las capas de espuma.
2. Desenchufa la tableta del tomacorriente. Mantén presionado el botón de encendido para apagar la tableta. Reúne todos los dispositivos que van en la caja del kit de salud.
3. Coloca la báscula en la parte inferior de la caja del kit de salud. Coloca la bandeja de espuma del medio encima de la báscula. Enrolla el cable de alimentación de la tableta.
4. Coloca el cable de alimentación y el adaptador, el oxímetro de pulso, el monitor de presión arterial, la base de la tableta y la tableta en las ranuras correspondientes.
5. Retira la cinta de la guía del usuario del kit de salud. Coloca la última pieza de espuma sobre la tableta. Cierra y sella la caja con la cinta que acabas de sacar de la guía del usuario. Si no encuentras la cinta, puedes usar en cambio cinta de embalaje.
6. Tu equipo de gestión de la atención médica te dirá cómo devolver el kit.

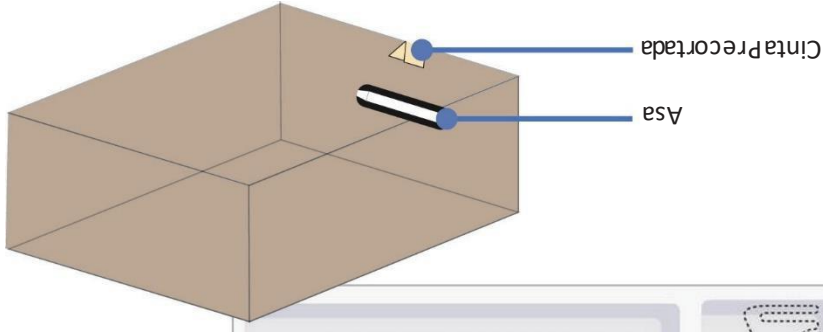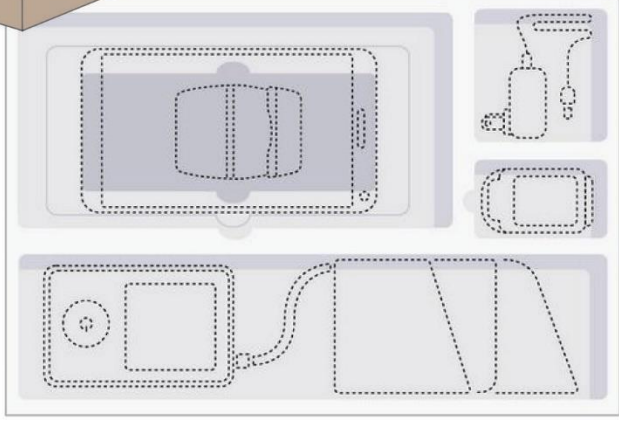

PESO

Debes usar la báscula durante el programa de gestión de la atención médica para registrar tu peso. Péstate por la mañana, después de ir al baño y antes de comer o beber algo.

NIVEL DE OXÍGENO Y PULSO

Debes usar el oxímetro de pulso durante el programa de gestión de la atención médica para registrar tu nivel de oxígeno y pulso. No uses esmalte de uñas o uñas postizas mientras usas el oxímetro de pulso. Si tus manos están frías, calientálas.

PRESIÓN ARTERIAL

Debes usar el monitor de presión arterial durante el programa de gestión de la atención médica para registrar tu presión arterial. No fumes, no bebas nada con cafeína y tampoco hagas ejercicio una hora antes de medirte la presión arterial. Además, si tu médico te indicó que tomes medicamentos para la presión arterial, tómalos una hora antes de medirte la presión arterial.

GLUCOSA EN SANGRE

Debe usar el medidor de glucosa durante el programa de gestión de la atención médica para registrar su glucosa en sangre. Mantenga las tiras reactivas en el envase y evite la exposición a la humedad.



IMPORTANTE: este producto no está diseñado para el monitoreo activo o continuo de pacientes ni para el uso en caso de afeciones agudas. Si necesitas atención de emergencia, llama al 911 de inmediato.

INGRESAR SIGNOS VITALES

Es posible que no todos los dispositivos de esta guía estén en el kit o que no los necesites todos. Los íconos de la tableta te mostrarán los dispositivos que debes usar. Esto lo establece tu equipo de gestión de la atención médica. Antes de comenzar, los dispositivos deben estar cerca de la tableta. Cuando el dispositivo no esté en uso, se apagará solo. **Los dispositivos solo deben usarse en el hogar cuando no se trate de una emergencia.**

Instrucciones para usar los dispositivos

Antes de usar los dispositivos, lee las instrucciones correspondientes que te indican cómo utilizar cada dispositivo. Las instrucciones incluyen detalles sobre cuándo hablar con tu médico antes de usar cada dispositivo. Este programa de gestión de la atención médica no requiere la descarga de ningún software.

Con los dispositivos del kit, haz lo siguiente:

1. **Mira el video de ayuda.** Cuando la tableta te pida que registres tus datos, selecciona **HELP (AYUDA)** si es necesario. Se reproducirá un video sobre cómo usar el dispositivo.

2. **Registra tus signos vitales.** Todos los dispositivos enviarán datos a la tableta y registrarán tus datos. Mientras usas cada dispositivo, espera unos segundos hasta que el dispositivo obtenga tu lectura. Aparecerá un número en el dispositivo. Confirma que la lectura de la tableta coincida con la lectura del dispositivo. Selecciona **OK (Aceptar)** para aceptar. Selecciona **YES (SI)** para confirmar.

Ingreso manual

Si un dispositivo no registra tus datos, selecciona **Manual Entry (Ingreso manual)**. En las casillas, ingresa los datos. Selecciona **OK (Aceptar)** para aceptar. Selecciona **YES (SI)** para confirmar.

Si el número que ingresas es incorrecto, selecciona **NO** para comenzar de nuevo y vuelve a ingresar los datos. Si estás utilizando tu propio dispositivo, debes ingresar tus datos manualmente.

IMPORTANTE: este producto no está diseñado para el monitoreo activo o continuo de pacientes ni para el uso en caso de atenciones agudas. Si necesitas atención de emergencia, llama al 911 de inmediato.

Para solicitar una devolución de llamada, selecciona el icono de teléfono en la pantalla de llamada, selecciona la pantalla de inicio. Aparece la pantalla Solicitar una llamada con hasta tres opciones y puede incluir **Cancelar** (**Later** (**Más tarde**) y **Now** (**Ahora**)).

Selecciona **Now** (**Ahora**) para solicitar una devolución de llamada rápida (generalmente dentro de las dos horas). Si solicitas una llamada dentro de las dos horas posteriores al cierre de operaciones, es posible que te devuelvan la llamada al siguiente día hábil.

Selecciona **Later** (**Más tarde**) para solicitar una devolución de llamada al final del siguiente día hábil (generalmente dentro de las veinticuatro horas). Después de seleccionar **Now** (**Ahora**) o **Later** (**Más tarde**), el icono del teléfono en la pantalla de inicio se volverá verde. Esto indica que estás esperando una llamada. El equipo de gestión de la atención médica intentará comunicarse contigo por teléfono o por video llamada en la tableta.

Selecciona **Cancel** (**Cancelar**) si cambias de opinión o para salir de la pantalla de solicitud de llamada. Aparece la pantalla de inicio. El icono de teléfono es gris. El cambio de color muestra que has cancelado la solicitud de llamada.



Puedes solicitar una devolución de llamada de tu equipo de gestión de atención médica con tu tableta. Las devoluciones de llamada no son inmediatas. Las devoluciones de llamada se realizan durante el horario de atención. **Esta función de devolución de llamada no debe utilizarse en caso de emergencia.**

SOLICITAR UNA LLAMADA

Gris	Lista para empezar	Debes hacer tu tarea ahora	No has hecho tu tarea	Terminaste tu tarea	Terminaste por el momento
Amarillo				Marca verde	Marca naranja


Una marca de verificación verde o naranja significa que no quedan preguntas de la encuesta o control de signos vitales pendientes. Cuando haya una tarea pendiente, el color del ícono cambiará a gris, amarillo o rojo.




Esta es una imagen de la pantalla de inicio cuando se realizan todas las tareas. Los iconos dependen de tu programa. Los iconos muestran las tareas que tu equipo de gestión de la atención médica desea que realices. Es posible que se te pida que realices estas tareas de chequeo a diario. Los recordatorios se manifiestan con cambios de color o sonidos.

ENTENDER LA TABLETA


Es posible que se te pida que veas videos educativos o leas sobre tu salud. Selecciona **Now (Ahora)** y luego **OK (Aceptar)** para ver el video ahora. Selecciona **Later (Más tarde)** y luego **OK (Aceptar)** para ver el video más tarde.

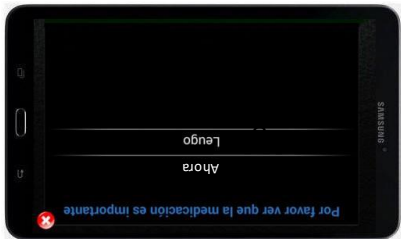

VER VIDEOS EDUCATIVOS

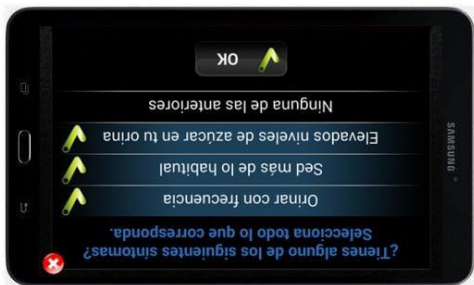

Respuestas múltiples
 Cuando veas una pregunta, selecciona todas las respuestas sobre tu salud actual. Cuando selecciones una o más respuestas, aparecerá **OK (Aceptar)**. Selecciona **OK (Aceptar)** para confirmar.

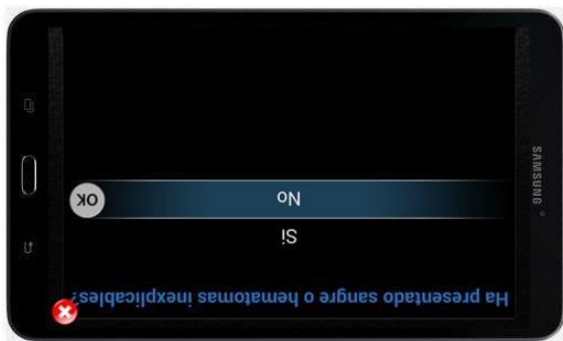

Cuando veas una pregunta, selecciona una respuesta sobre tu salud actual. Selecciona **OK (Aceptar)** para confirmar. Si deseas cambiar tu respuesta, selecciona la respuesta correcta. Luego, selecciona **OK (Aceptar)** para confirmar.

Respuesta única

Las preguntas aparecen de dos formas:

COMPLETAR LA ENCUESTA DE SALUD




Cuando aparezca la pantalla de inicio de sesión verde, crea tu contraseña. Con el teclado, ingresa un número de cuatro dígitos que puedas recordar. No puedes usar el mismo número cuatro veces (1111). No puedes usar números consecutivos (1234). Anota el número. Guárdalo en un lugar seguro, para que puedas consultarlo más tarde cuando inicies sesión. Selecciona **OK (Aceptar)** para enviar la contraseña.

Crea una contraseña.

INICIAR SESIÓN


BIENVENIDO AL PROGRAMA

Cuando selecciona **OK** (Aceptar) en la pantalla Welcome to the Program (Bienvenido al programa), aparece la pantalla **Date of Birth** (fecha de nacimiento). En la casilla de Date of Birth ingrese su fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA) para confirmar su identidad. Si la fecha de nacimiento que ingresó no coincide con nuestros registros, verá un mensaje para que se comuniquen para recibir ayuda. Después de confirmar su fecha de nacimiento, aparecerá el video de bienvenida (desempaque).

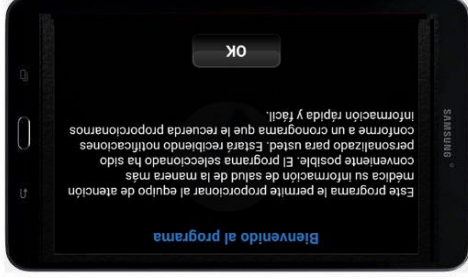

ACEPTAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

Después de que se reproduzca el video, lee y selecciona **I AGREE (ACEPTO)** para aceptar el Acuerdo de licencia de usuario final (EULA). *Nota: no podrás continuar si no aceptas los términos y condiciones del programa.*

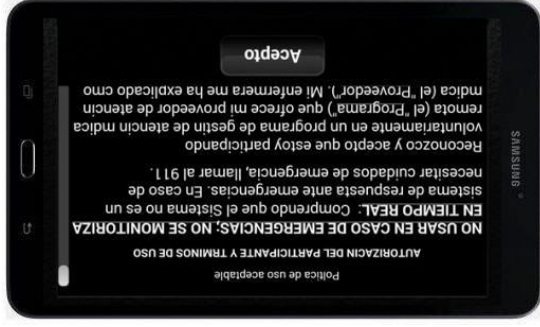

CÓMO COMENZAR

ENCENDIDO DE LA TABLETA

- 1. Desempaca el kit.**
Desempaca la caja en la mesa donde usarás la tableta. Debes poder ver la tableta cuando usas los dispositivos, para que estos se conecten de forma inalámbrica.
- 2. Enchufa el adaptador de corriente en un tomacorriente cercano. Conecta el cable de alimentación a la tableta.**
- 3. Enciende la tableta.**
Mantén presionado el botón de encendido por varios segundos y luego suéltalo. Mira la imagen de abajo. El botón de encendido está arriba del punto verde en la pantalla de la tableta. Espera que se reproduzca el video de bienvenida.
- 4. Coloca la tableta en su base.**
Mantén la tableta encendida y enchufada hasta que completes el programa y vuelva a guardar el kit.




DESEMPACAR EL KIT

El kit de salud contiene dispositivos que puedes usar durante el programa de gestión de la atención médica para registrar tus signos vitales. Todos los dispositivos están listos para usar con la tableta.

CONTENIDO DEL KIT DE SALUD

Los dispositivos de la caja pueden variar según tu programa. Para la mayoría de los programas, la caja contiene lo siguiente:

- Tableta
- Base para la tableta
- Adaptador y cable de alimentación
- Báscula
- Monitor de presión arterial
- Oxímetro de pulso

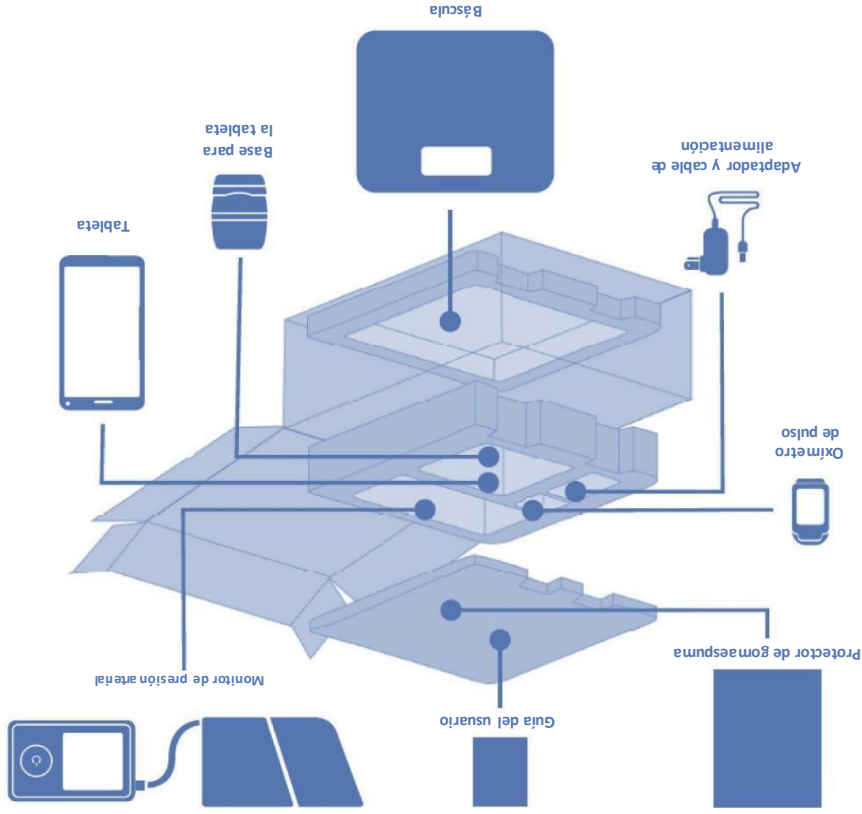

IMPORTANTE: guarda la caja que parece una maleta con espuma en el interior para volver a empaquetarlo. Guárdala en un lugar seguro.

INTRODUCCIÓN

Gracias por participar en el programa de gestión de la atención médica. Lee la introducción al programa.

Desempacar el kit

Después de abrir la caja, sigue las instrucciones para encender la tableta. Déjala enchufada. No la apagues hasta que completes el programa y devuelvas el kit. IMPORTANTE: guarda la caja para devolver el kit, incluida la espuma y las tiras de cinta de embalaje. La caja del kit parece una pequeña maleta. Guarda esta caja en un lugar seguro para evitar que se pierda o se dañe.

Iniciar sesión

Crear una contraseña que puedas recordar. Anota la contraseña. Guárdala en un lugar seguro. Deberás ingresarla cada vez que inicies sesión.

Cómo completar la encuesta de salud e ingresar tus signos vitales

Cuando se te pregunte, selecciona las respuestas a las preguntas que mejor describan tu estado de salud actual. Sigue las instrucciones para ingresar tus signos vitales. Tu equipo de gestión de la atención médica analizará los resultados. Es posible que se comuniquen contigo para hablar sobre tus resultados.

Horario del chequeo

Es posible que la tableta haga un sonido para avisarte que controlaste tus signos vitales. Tu equipo de gestión de la atención médica decidirá con qué frecuencia sonarán dichos avisos. Toma tus signos vitales antes del mediodía, a menos que tu equipo de gestión de la atención médica te indique lo contrario.

Empacar de nuevo y devolver su kit de salud

Tu equipo de gestión de la atención médica te llamará cuando finalice el programa. Ellos te indicarán cómo devolver el kit. Lee *Empacar el kit* para conocer los detalles sobre cómo volver a empacar el kit de salud.

NO USES ESTE PROGRAMA PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA O URGENCIA. EN CASO DE EMERGENCIA, LLAMA AL 911 O ACUDE A LA SALA DE EMERGENCIAS. MÁS CERCA. El programa y el personal de enfermería del programa y otros representantes no pueden diagnosticar tus problemas ni sugerir un tratamiento. Este programa no sustituye la atención de tu médico. Tu información médica es confidencial en cumplimiento de la ley. Toda información y dispositivos proporcionados a través de este programa son solo con fines informativos. La participación en el programa y el uso del dispositivo son voluntarios, y tu capacidad para usar el dispositivo puede variar según la naturaleza de tu afección médica. El programa y el dispositivo no brindan monitoreo en tiempo real ni actúan como un sistema de alerta de emergencia, y tampoco están diseñados para usarse cuando se requiere atención médica de urgencia.

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN
2	DESEMPACAR EL KIT
3	CÓMO COMENZAR
3	Encendido de la tableta
3	Bienvenido/Aceptar los términos y condiciones
4	Iniciar sesión
5	Completar la encuesta de salud
5	Ver videos educativos
6	Entender la tableta
6	Solicitar una llamada
8	INGRESAR SIGNOS VITALES
9	Peso
9	Nivel de oxígeno y pulso
9	Presión arterial
10	EMPACAR EL KIT
11	PREGUNTAS FRECUENTES
11	Lecturas incorrectas
11	Encendido de la tableta
11	Restablecer la contraseña
11	Visualizar la información de salud
11	Conectividad inalámbrica



Versión 11

Vivify Pathways Home 

Guía del usuario

